




Doctor Tecar **PLUS**

DOCTOR
H R O O D



- 01 EVOLUCIJA TEHNIKE
- 01 TEHNIČKI KNOW-HOW
- 02 40 GODINA INOVACIJA
- 03 VAŠ PARTNER U SPORTU
- 04 TEHNOLOGIJA U SLUŽBI MEDICINE
- 04 ZA SIGURNU I EFIKASNU TERAPIJU
- 05 TERAPIJA ZA EFEKAT
- 06 KO BIRA DOCTOR TECAR PLUS?
- 08 JEDNOSTRUKI NASADNIK
- 09 BIOTRANSFERNI SISTEM
- 10 LEČENJE AKUTNIH, SUBAKUTNIH I HRONIČNIH
- 11 FAZE
- 12 Rezistivni režim
- 12 Kapacitivni režim
- 13 ZA FLEKSIBILNU TERAPIJU
- 14Vreme/džul režim
- 16 Podesivi pulsni režim
- 20 MENADŽMENT TERAPIJE
- 20 AVX REŽIM
- 20 MODELI
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PRIBOR

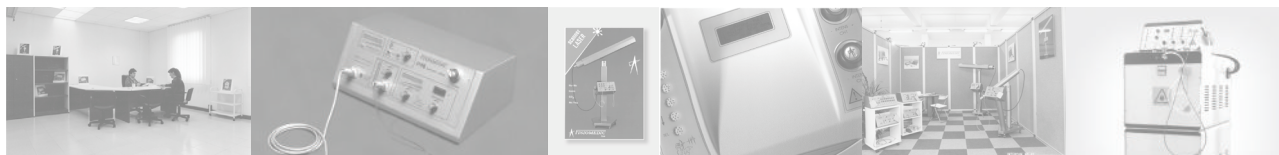

EVOLUCIJA TEHNIKE

Mectronic dizajnira i proizvodi instrumentalne uređaje za fizikalnu terapiju od 1986. godine i sa **preko 23000 medicinskih uređaja je lider u sektoru u smislu znanja i iskustva.**

Iskustvo stečeno godinama, kontinuirano istraživanje i direktan kontakt sa terapeutima i doktorima omogućili su Mectronic-u da uvede na tržište najsavremenije instrumente, kako u pogledu performansi tako i načina upotrebe.

Zahvaljujući kontinuiranom tehnološkom i terapijskom istraživanju, Mectronic predstavlja **Doctor Tecar PLUS**, inovativni tecar terapijski uređaj posvećen rehabilitaciji.

Doctor Tecar PLUS je kompaktan i moćan instrument, jedinstven u svojoj vrsti: mogućnost upravljanja terapijom prema različitim

postavkama daje terapeutu apsolutnu kontrolu nad tretmanom. Kompletan uređaj, sposoban da vodi terapiju uz održavanje sigurnosti i terapijske efikasnosti; biblioteka patologije, protokoli objašnjeni po fazama, inovativni terapijski modaliteti i praktični i funkcionalni dodaci čine **Doctor Tecar PLUS** osnovnim sistemom za terapijsku praksu visokog nivoa.

Doctor Tecar PLUS je takođe obogaćen AVx (Automatic Vehiculation eXperience system) modulom, sistemom sa inovativnim modalitetima: transdermalna vehikulacija i mogućnost rada u automatskom pulsnom režimu.



10

PATENATA



67

ZEMALJA



23.000

PROIZVEDENIH UREĐAJA

Sa više od 40 godina iskustva, Mectronic je jedan od glavnih evropskih proizvođača opreme za fizikalnu terapiju i medicinskih lasera, kao i partner brojnih i važnih univerziteta i istraživačkih centara.

Kontinuirane tehnološke inovacije, stalna naučna istraživanja i saradnja sa vodećim stručnjacima u industriji, garantovali su Mectronic sigurne i inovativne terapije za fizički oporavak pacijenata.

40 GODINA INOVACIJE

1982

OSNOVAN JE MECTRONIC

Inženjer Djan Karlo Aloisini osniva Mectronic zajedno sa drugim partnerima.



1985

Mectronic dizajnira i pravi prvi laser skener dostupan u četiri različite konfiguracije: He-Ne, GaAs, CO i Nd:Yag.



1997


FP3 SYSTEM

Mectronic dizajnira, patentira i proizvodi prvi svetski poluprovodnički laser sa tri talasne dužine (FP3 sistem).

2007

KONTROLA TEMPERATURE

Mectronic patentira prvi sistem za merenje, obradu i praćenje temperature kože tokom tretmana.

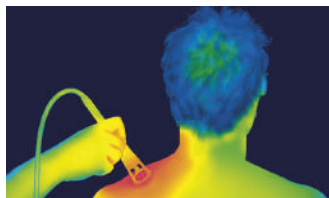

2009

E²C: PATENTIRANA STOHAŠTIČKA EMISIJA

Mectronic kreira i patentira inovativni režim stohastičke emisije sa niskim toplotnim uticajem koji generiše laserske impulse koji variraju u smislu trajanja i intenziteta.

2012

iLux

Mectronic lansira iLux na tržište: lagani, moćni i kompaktni polimodalni HEL laserski uređaj.



2020

NOVI PROIZVODI

Mectronic predstavlja novi asortiman proizvoda za lasersku terapiju, Tecar terapiju i Chelt terapiju.



1984

PRVI LASER

Dizajn i proizvodnja prvog super-pulsnog poluprovodničkog laserskog sistema.



1986

PRVI TERAPEUTSKI ND:YAG LASER NA SVETU

Mectronic dizajnira prvi Nd:Yag laser na svetu s kontinuiranom emisijom za fizikalnu terapiju. Rađa se laserska terapija velike snage.



2006

VIŠE OD 3000 LASERA POSTAVLJENO ŠIROM SVETA

Mectronic je prodao **3000** lasera širom sveta



2010

CHELT TERAPIJA

Chelt terapija je rođena; sinergija između trolasne laserske terapije velike snage i suve krioterapije na -35°.



2017

THEAL TERAPIJA

Mectronic patentira i predstavlja inovativnu THEAL TERAPIJU:

Kontrolisana temperatura

Visoka

Energija

Podesiva višerežimska emisija

Laser



VAŠ PARTNER U SPORTU

Bilo da se radi o prevenciji, lečenju povreda ili poboljšanju fizičkih performansi, Mectronic uređaji su dostupni glavnim medicinskim i fizioterapeutskim operaterima koji brinu o profesionalnom sportisti.

MECTRONIC MEDICALE JE ZVANIČNI PARTNER:

 **TECHNICAL SUPPLIER**
MEDICAL EQUIPMENT



Mectronic
HEALTHCARE

Fornitore Ufficiale
1025724



FINP
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPOICO



TEHNOLOGIJA U SLUŽBI MEDICINE

ZA SIGURNU I EFIKASNU TERAPIJU

Za Doctor Tecar PLUS, Mectronic je usvojio inovativnu Switching Real Time Wave Cube tehnologiju: zahvaljujući ovom važnom tehnološkom koraku, mogu se postići velika snaga i visoke terapijske performanse.

Tehnologija prebacivanja u realnom vremenu također je omogućila smanjenje veličine uređaja: **Doctor Tecar PLUS** je kompaktan, moćan i prenosiv.

Doctor Tecar PLUS nasadnik je dizajniran za isporuku u oba kraja terapije, bez potrebe za promenom aplikatora.

Ovaj veliki proboj je moguć zahvaljujući znanju koje je Mectronic gradio više od 40 godina, dizajnirajući i proizvodeći komponente svojih uređaja prema terapijskom ishodu.

Istraživačka i razvojna aktivnost koja je vremenom rasla, zahvaljujući direktnom kontaktu sa terapeutima, istraživačima i praktičarima; kontinuirani fokus koji Mectronic proizvode čini što bližim potrebama operatera i pacijenata.

Napredna tehnologija Doctor Tecar PLUS i njen inovativni pristup tretmanu garantuju visok nivo terapijske efikasnosti. Dijatermički efekat koji može da se ostvari omogućava brz oporavak u akutnoj, subakutnoj i hroničnoj fazi. Pored toga, Doctor Tecar PLUS omogućava veliki stepen prilagođavanja i terapija se može prilagoditi specifičnim potrebama operatera i pacijenta.



S. R. T. Wave Cube tehnologija

Kompaktan i prenosiv dizajn

Jednostavan za korišćenje

PATOLOGIJE

- Konflikt sindrom
- Povrede rotatorne manžetne
- Artroza
- Epikondilitis
- Epitrohleitis
- Burzitis
- Prelomi
- Uganuća
- Povrede mišića
- Povrede tetiva
- Tendinitis
- Sindrom karpalnog tunela
- Pubalgija
- Rekonstrukcija prednjih ukrštenih ligamenata
- Kontrakture
- Bol u donjem delu leđa
- Išijas
- Bol u vratu
- Cervikalna brahijalgija
- Spondiloza
- Koksartroza
- PiriFormis sindrom
- Gonartroza
- Plantarna fascija
- Post-operativna terapija



TERAPIJA ZA **EFEKTE**

BIOSTIMULACIJSKI EFEKAT

Tačna količina energije koja se prenosi na tkivo, dovodi do fenomena polarizacije ćelija. Rezultirajući protok elektrolita podstiče transmembransku razmenu u ćeliji, rebalansirajući na taj način intra- i ekstraćelijski matriks i reaktivirajući sve metaboličke procese.

ANTALGIČNI EFEKAT

Pravilna doza energije stupa u interakciju s perifernim nervnim sistemom. Hiperpolarizacija brzih vlakana, nastala brзом oscilacijom elektromagnetnog polja, sprečava širenje bolnog stimulusa. To rezultira progresivnom regresijom simptoma i osećajem novootkrivenog blagostanja za pacijenta.

PROTIVUPALNO DEJSTVO

Kontrolisano delovanje tecar terapije omogućava doziranje energije tako da prirodno toplotno stanje tkiva može proizvesti, kroz kontrolisanu vazodilataciju, ispiranje upalnih katabolita u povređenoj regiji.

EFEKAT ANTI-EDEM

Kontrolisani prenos energije kroz tkiva izaziva lokalizovano povećanje temperature tkiva, stimulišući cirkulatorni sistem na termoregulaciju. Ovo rezultira snažnom vaskularizacijom i vazodilatacijom ishemijskih područja, što podstiče trenutno povećanje pokretljivosti hemolimfe.

EFEKAT DEKONTRAKCIJE

Prolazak energije kroz tkiva i nastali elektrolitički tok dovode do povećanja lokalizovane toplote. Nastala vazodilatacija ima primarni efekat povećanja protoka krvi uz trenutnu korist za slabo vaskularizovana područja, pošto prisustvo arterijske krvi omogućava pravilnu oksigenaciju mišića.



ZAŠTO IZABRATI **DOCTOR TECAR PLUS?**

TEHNOLOGIJA I INOVACIJA

Zahvaljujući tehnologiji preklapanja u realnom vremenu koju je razvio Mectronic, Doctor Tecar PLUS predstavlja pravi proboj u tecar terapiji: visoko inovativan sistem u smislu tehnologije, performansi i načina upotrebe.

PRAKTIČNOST I SVESTRANOST

Sposobnost Tecar struje da prenosi energiju više ili manje duboko u biološka tkiva je funkcija frekvencije. Doctor Tecar PLUS može da isporuči Tecar struju na 7 različitih frekvencija, od 300 kHz do 1,5 MHz, uključujući dobro poznatu frekvenciju od 448 kHz.

TAČNOST I POUZDANOST

Napredna tehnologija Doctor Tecar PLUS garantuje snagu, preciznost i efikasan tretman za sve terapijske potrebe.

INTERAKTIVNO ISKUSTVO

10,1" ekran osetljiv na dodir vodi korisnika kroz upravljanje terapijom na jednostavan i intuitivan način; efikasan od prve upotrebe.



**FLEKSIBILNA
TERAPIJA:**
KONTROLA I
PRILAGOĐAVANJE



**JEDNOSTRUKI
NASADNIK**



**BIO-TRANSFER
SISTEM**



**AVX
REŽIM**



**7 RAZLIČITIH
FREKVENCIJA**



**TRETMAN U
AKUTNOJ,
SUBAKUTNOJ I
HRONIČNOJ FAZI**





JEDAN

NASADNIK

1

Doctor Tecar PLUS opremljen je jednim nasadnikom za kapacitivni i rezistivni režim. Jednostavnom kontrolom možete prelaziti s jednog režima na drugi: jednostavnost i funkcionalnost u najmodernijoj terapijskoj tehnologiji.

Nasadnik je dizajniran da bude najbolji saveznik svakog terapeuta u svakodnevnoj praksi: lagan je, ergonomski i napravljen od biokompatibilnog silikona koji je u skladu sa UL94 V2 standardom. Nasadnik je takođe opremljen sistemom za prepoznavanje prisustva aplikatora, čime se izbegava mogućnost grešaka i maksimizuje bezbednost.



BIOTRANSFERNI SISTEM

Doctor Tecar PLUS ima inovativni Biotransferni sistem za detekciju količine energije koja se prenosi na tkiva, što se signalizira putem grafičke i akustične povratne informacije. Sistem detektuje energiju koja se prenosi na biotkiva unutar tretirane anatomske regije, u odnosu na isporučeno vreme i snagu.


Ovaj sistem omogućava procenu aktivne hiperemije i posledičnog

povećanja protoka elektrolita, naglašavajući promenu u električnoj impedansi tokom tretmana u poređenju sa početnom vrednošću u stanju mirovanja.


Varijacija impedanse traje tokom vremena čak i nakon završetka tretmana, obezbeđujući tačnu i kontinuiranu oksigenaciju svih tretiranih komponenti tkiva.




SNAGA: **25 VA** | VREME: **02:00**

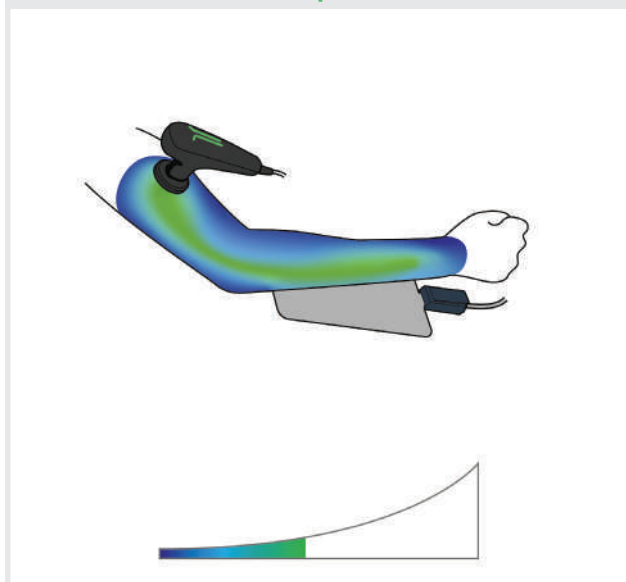

SNAGA: **25 VA** | VREME: **02:00**

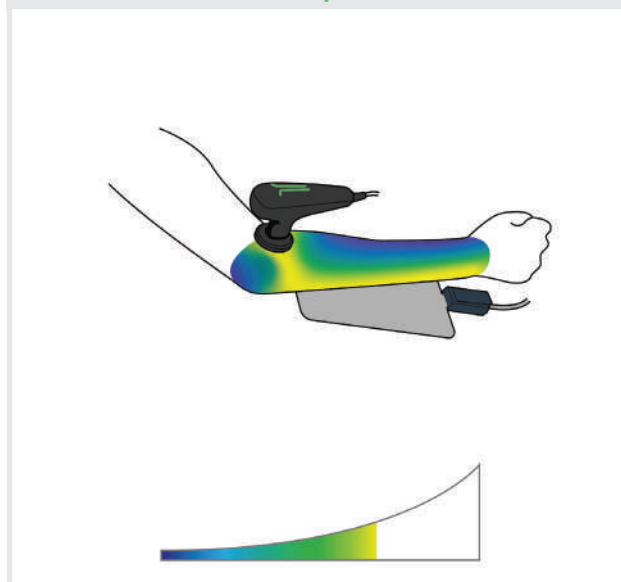

SNAGA: **25 VA** | VREME: **02:00**

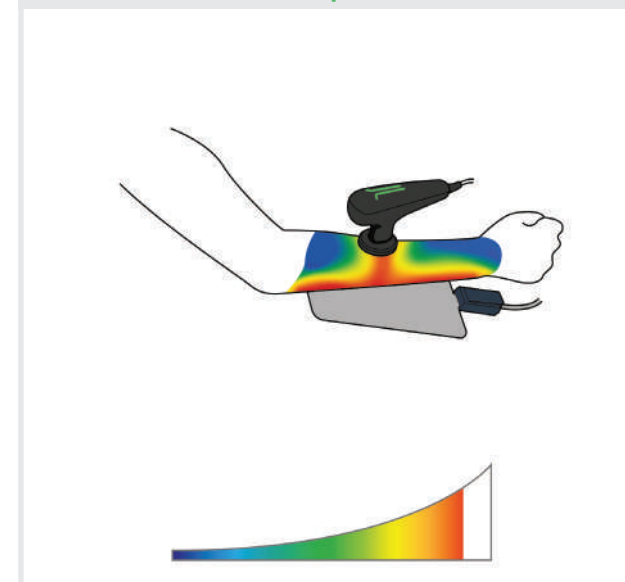

LEČENJE U

AKTIVNOJ, SUBAKUTNOJ I HRONIČNOJ FAZI



Snaga do 200 VA

Precizna kontrola snage i veliki opseg snage omogućavaju da se energija prenosi na ciljani, bezbedan i efikasan način, maksimizujući terapijske rezultate.

Zahvaljujući ovoj fleksibilnosti rada, operater može da tretira različite patologije različitih pacijenata, na različitim modalitetima i različitim aplikatorima.

Da bi dodatno optimizovao tretman, **Doctor Tecar PLUS** može da dosegne do 600 W od maksimuma do maksimuma (Wpp), omogućavajući terapeutu da proširi radne mogućnosti.

Multifrekvencija

Rezistivni režim (450 kHz) i kapacitivni režim (600 kHz) su samo dve od frekvencija koje **Doctor Tecar PLUS** može da koristi: zahvaljujući Mectronic-ovoj tehnologiji prebacivanja u realnom vremenu, uređaj je u mogućnosti da prelazi između sedam različitih frekvencija u rasponu od 300 kHz do 1,5 MHz, maksimizujući terapeutske efekte.



REZISTIVNI REŽIM

Rezistivni režim omogućava struji da teče kroz tvrđa tkiva tela kao što su kosti, ligamenti i glavne tetive, koja generalno sadrže manje vode. Ovo rezultira fokusiranijim terapijskim delovanjem na željeni anatomski deo.

PRILAGODJENI REŽIM

Prilagođeni režim (f) omogućava terapeutu da odabere frekvenciju kojom se terapija sprovodi.

KAPACITIVNI REŽIM

Kapacitivni režim koncentriše energiju uglavnom prema mekšim tkivima ljudskog tela, kao što su mišići i područja bogata vodom, omogućavajući terapeutu da fokusira delovanje terapije na anatomske delove koji sadrže više tečnosti.

OSCILIRAJUĆI REŽIM

Oscilirajući režim omogućava višefrekventni tretman tecar terapije. Korisnik može birati između dve vrste ovog režima, početne frekvencije i krajnje frekvencije primene terapije, postavljajući vreme isporuke za svaki korak frekvencije.



ZA FLEKSIBILNU TERAPIJU

KONTROLA I PRILAGOĐAVANJE

Doctor Tecar PLUS je kompletan sistem, fleksibilan alat koji podržava svakodnevni rad terapeuta. Zahvaljujući tehnologiji Switching Real Time Wave Cube, **Doctor Tecar PLUS** nudi niz načina za postavljanje terapije, kao i vrlo inovativne karakteristike.

Režim VREME/DŽUL

Doctor Tecar PLUS može da podesi izlaz prema vremenskim i energetskim parametrima. U prvom slučaju operater može da naznači vreme terapije i Doctor Tecar PLUS prestaje s isporučivanjem kada se dostigne postavljeno vreme terapije.

U Džul režimu operater može da podesi energetsku dozu terapije; izlaz će se završiti kada se dostigne postavljena vrednost.





PODESIVI PULSNI REŽIM

Efikasna termička kontrola

U lečenju mišićno-koštanih poremećaja u akutnoj fazi, prekomerno povećanje efekta aktivne hiperemije može prouzrokovati vazodilataciju. Ovo poslednje izaziva izraženu osetljivost algoreceptora, što dovodi do netolerancije pacijenta prema terapiji.




Da bi se ova situacija ublažila, **Doctor Tecar PLUS** ima Podesivi pulsni režim, u kome se terapija sprovodi u redovnim

intervalima. Pauze (t isključeno) između jednog i drugog impulsa (t uključeno) omogućavaju kontrolu energije koja se daje tkivima, poštujući "prirodno termalno" stanje u korist ispravne ćelijske homeostaze.

Tako su isključene sve neželjene nuspojave kao što je povećan algijijski stimulans.

Osim toga, Podesivi pulsni režim **Doctor Tecar PLUS**

omogućava operateru da lično podesi vreme isporuke i pauze (t uključeno i t isključeno), garantujući terapiju prilagođenu svakom pacijentu. Stoga je moguće raditi u termalnom, prirodno termalnom i atermalnom režimu.

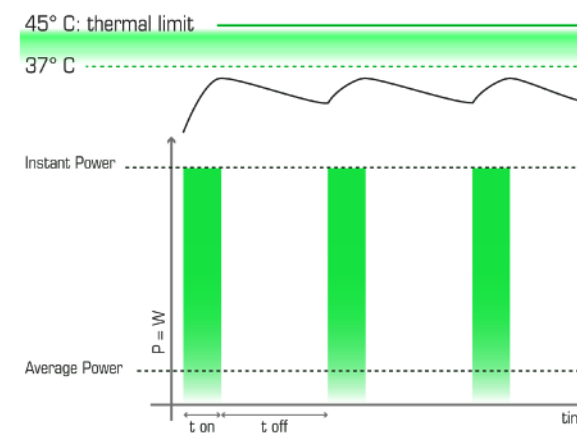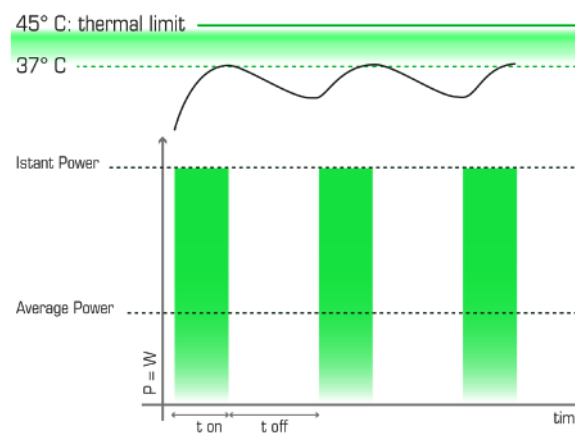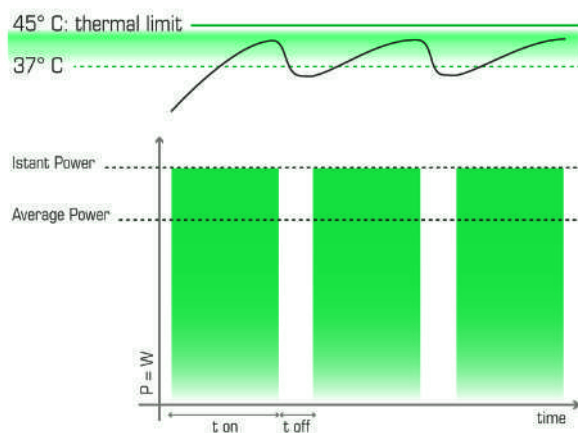



UPRAVLJANJE

LEČENJA

MecOS 5.0 Softver;
inovacija u terapiji

BIBLIOTEKA PATOLOGIJA

Doctor Tecar PLUS ima biblioteku patologija od preko 60 patologija s interaktivnim protokolima podeljenim u faze. Softver takođe nudi bezbednost trenutnih grafičkih povratnih informacija koje prikazuju snagu, vreme i stvarni izlaz uređaja.

CILJANO REŠENJE

Doctor Tecar PLUS je uveo važnu inovaciju u postavku tretmana: za prilagođenu i efikasniju terapiju, **Doctor Tecar PLUS** automatski postavlja najbolje vrednosti snage, energije i emisije na osnovu podataka o pacijentu (somatotip, starost, nivo bola) koje je terapeut uneo.



VODIČ ZA LEČENJE


Biblioteka patologija **Doctor Tecar PLUS** uključuje poseban protokol za svaku patologiju. Korisnički interfejs jasno vodi operatera kako da tretira pacijenta sa detaljnim opisom i namenskim informacijama.

BEZBEDNOST I KONTROLA

Kako bi omogućio terapeutu da proveri greške ili probleme koji se mogu pojaviti, **Doctor Tecar PLUS** je integrisao sveobuhvatan i jednostavan servisni ekran u postavke uređaja.

Servisni ekran takođe ima automatsku proveru kablova: jednostavan test vam omogućava da brzo proverite da li kablovi ispravno rade.



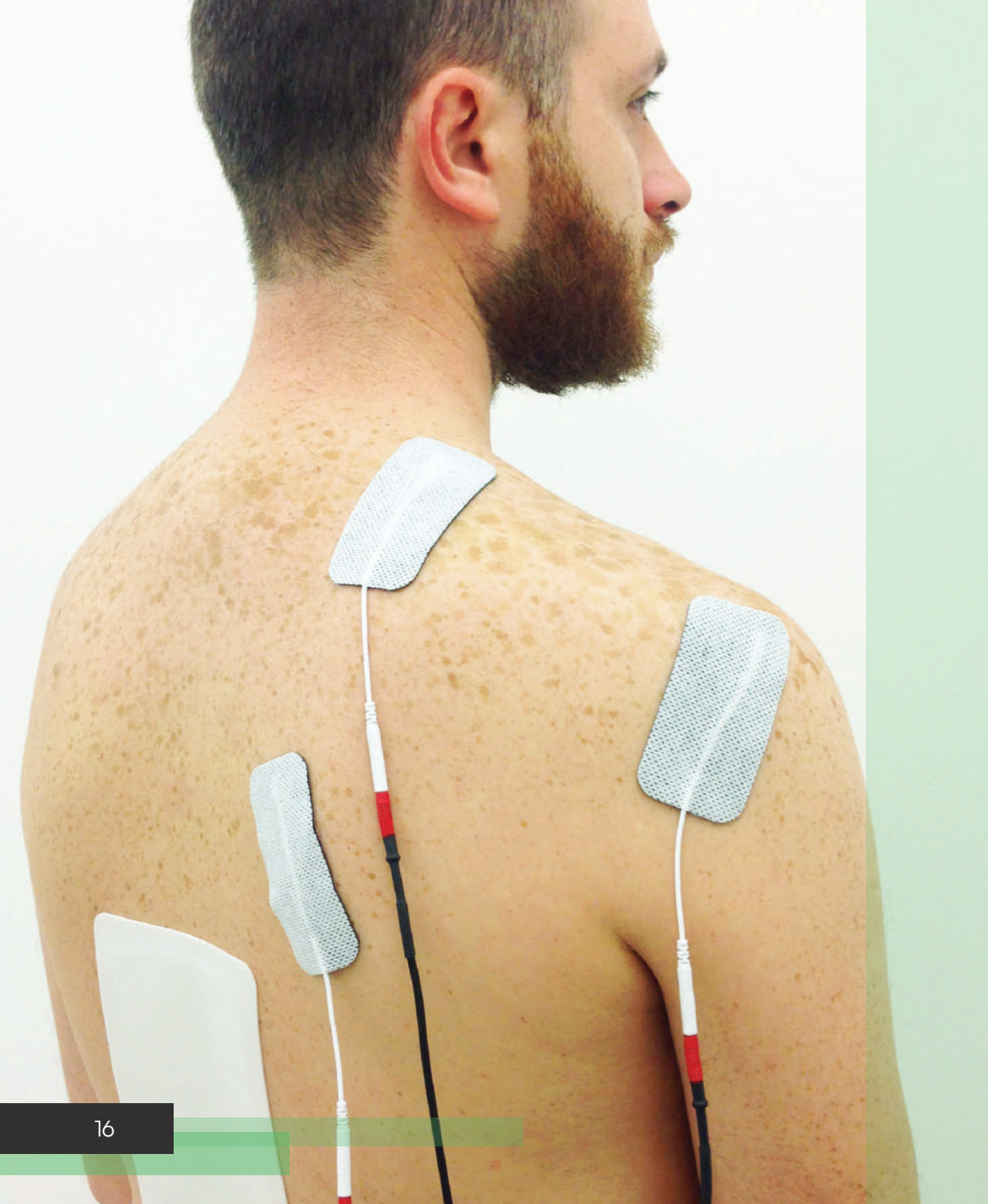

AVX REŽIM

Često tokom svakodnevnog rada terapeuti moraju privremeno da se oslobode ručnog tretmana, jer rade stalno i bez pauze. Iz tog razloga, **Doctor Tecar PLUS** je uveo mogućnost rada u automatskom režimu. Ova inovacija omogućava da terapeut ne bude ograničen na uređaj.

Optimizacija vremena sa automatskim načinom rada

Sa AVx režimom, tecar terapija više nikada neće biti ista: sa četiri nova režima dizajnirana da zadovolje potrebe terapeuta, **Doctor Tecar PLUS** se transformiše u jedinstvenu platformu sposobnu da podrži terapijsku aktivnost na najbolji mogući način.

Automatski režim **Doctor Tecar PLUS** je dizajniran da omogući terapeutu da se oslobodi ručne upotrebe tecar terapije: specijalni kabl i tri elektrode omogućavaju tretman čak i složenih delova tela.

AVx režim omogućava integraciju 4 nova režima: dva toka emisije (simultani i sekvencijalni) svaki sa tri načina emitovanja (kontinuirani, impulсни i dimer).

SIMULTANI REŽIM

Automatska sinhronizovana emisija

Simultani režim je režim koji postavlja operater u kome se energija isporučuje sa svih elektroda istovremeno. Energija može da se isporuči u konstantnom strujnom toku (ako je odabrano Continuous Emission) ili sa impulsnim strujnim tokovima (ako je odabrano Puls Emission, za koji se takođe može podesiti režim).

Tretman za simultani režim sprovodi se pomoću posebnog automatskog kabla, zahvaljujući kome prisustvo terapeuta više nije obavezno.

Tretman se može prilagoditi podešavanjem energije, režima i načina emisije.

SEKVENCIJALNI REŽIM

Napredna automatska sekvencijalna emisija


Sekvencijalni režim je režim koji postavlja operater u kojem se energija isporučuje s elektroda jedna za drugom, prateći precizan redosled. Energija može da se isporuči u konstantnom strujnom toku (ako je odabrano Continuous Emission) ili u tokovima impulsne struje (ako je odabrano Puls Emission, za koji se takođe može podesiti režim).

Tretman može da se prilagodi podešavanjem redosleda u kome će elektrode isporučivati energiju, režima i načina emisije. U sekvencijalnom režimu, vreme isporuke svake elektrode takođe se može podesiti.

Nakon što terapeut odabere konfiguraciju za terapiju, softver omogućava da se konfiguracija sačuva kao prilagođeni protokol, koji se uvek može preuzeti u namenskoj biblioteci softvera.

Tretman za sekvencijalni režim se izvodi pomoću posebnog automatskog kabla, zahvaljujući kome prisustvo terapeuta više nije obavezno.



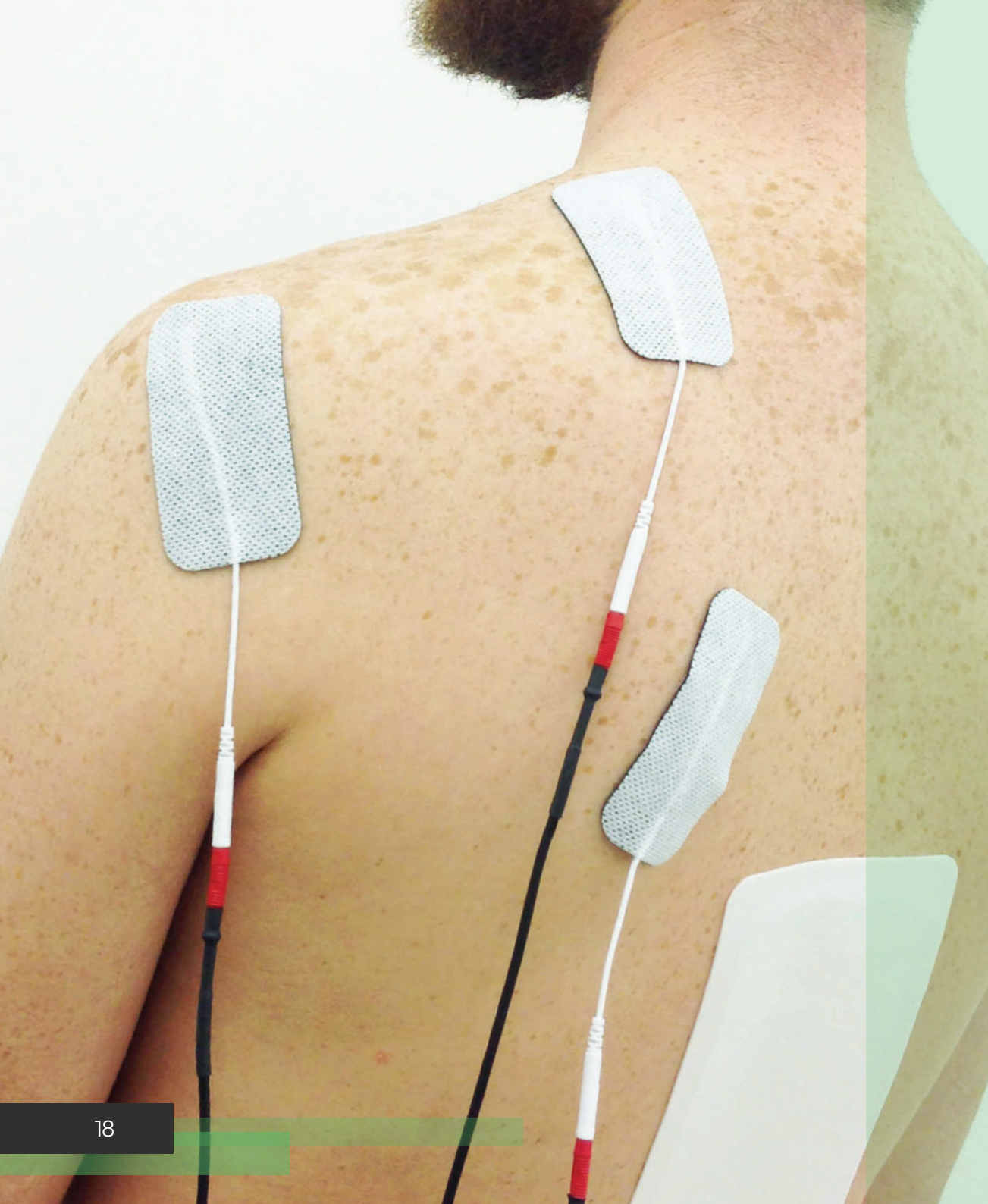

KONTINUIRANA emisija

Ovaj način rada omogućava da tecar struja teče stabilno i kontinuirano tokom vremena.

PODESIVA PULSNA emisija

U ovom režimu, uređaj isporučuje impulse tecar struje svakoj aktivnoj elektrodi. Isporuka se odvija prema unapred postavljenim redovnim vremenskim intervalima koji omogućavaju prenos energije kontrolisanim termičkim delovanjem na tkivo.

DIMER emisija

Inovativni režim zatamnjenja omogućava kombinovanje korisnih efekata kontinuiranog i impulsnog režima u jednoj emisiji, što omogućava bolje upravljanje termalnim efektima tokom tretmana.

AUTOMATSKI KABL

Specijalni kabl sa tri elektrode omogućava Doctor Tecar PLUS da uključi čak i složene geometrije anatomskih regija.

MAKSIMALNA BEZBEDNOST

Pacijent može da prekine terapiju brzo i u bilo kom trenutku zahvaljujući dugmetu za zaustavljanje koji se lako koristi.



Doctor Tecar **PLUS** Standard | AVx



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNOLOGIJA	Real-Time Operating System proprietary MecOS 5.0
EFEKTIVNA SNAGA	200 VA
MAKSIMALNA SNAGA	600Wpp
BIOTRANSFER	Grafička i akustična povratna informacija
SPOJNICA	Kontaktni kontrolni sistem
PROVERA KABLOVA	Automatska provera sa grafičkim i zvučnim povratnim informacijama
EKRAN	KAPACITIVNI EKRAN U boji osetljiv na dodir 10,1"
NAPAJANJE	100÷240V 50÷60Hz
APSORPCIJA	250 VA
DIMENZIJE	290 x 265 x 150 mm (bez kolica) 516 x 516 x 1017 mm (sa kolicima)
TEŽINA	4,5 kg (bez kolica) 23,5 kg (sa kolicima)
USKLADJENOST	IEC/EC 60601-1 60601-1-2
DIREKTIVA	93/42 IIb klasifikacija
FREKVENCIJE	300 kHz - 448 kHz - 500 kHz - 750 kHz - 1 MHz - 1.2 MHz - 1.5 MHz

UKLJUČENI PRIBOR



Šifra 20MA.DTLED

Nasadnik "PLUS" sa LED indikatorom i magnetnim priključkom



Šifra 80024

Zajednički kabl




Šifra 30CL.PLS-T

Kolica za uređaj i pribor



Šifra 80046 A

Zajednička ploča
150 x 200 mm
Nerđajući čelik

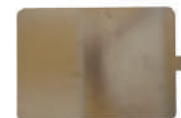

Šifra 80046

Zajednička ploča
200mm x 280mm
Nerđajući čelik



Šifra 20PI.DTP35P

Ravan aplikator
Ø 35 mm
POM poklopac



Šifra 20PI.DTP60P

Ravan aplikator
Ø 60 mm
POM poklopac



Šifra 80035

Kabl za napajanje



Šifra 20PI.DTB35P

Zaobljeni aplikator
Ø 35 mm
POM poklopac



Šifra 20PI.DTB60P

Zaobljeni aplikator
Ø 60 mm
POM poklopac



Šifra 80042F

Provodljiva krema

OPCIONI PRIBOR



Šifra 30MA.DTBIPO-P
Mali bipolarni nasadnik



Šifra 30MA.DTBIPO-G
Veliki bipolarni nasadnik



Šifra 150
Torba



Šifra 20PI.DTP85P
Ravan aplikator
Ø 85 mm
POM poklopac



Šifra 20PI.DTB85P
Zaobljeni aplikator
Ø 85 mm
POM poklopac

OPCIONI AVX PRIBOR



Šifra TRX
Kabl za automatsku aplikaciju



Šifra 80019
Pakovanje od 10
običnih lepljivih ploča



Šifra 80073
Lepljive elektrode
Dimenzije: 40mm x 80mm
Pakovanje od 120 komada



Šifra 80054
Dugme za pacijenta



www.mectronicmedicale.com

Pratite nas:



Ističemo da su sve tehničke specifikacije, informacije i brojke sadržane u ovom dokumentu isključivo indikativnog karaktera. MECTRONIC MEDICALE S.r.l. zadržava pravo izmene podataka, brojki i informacija sadržanih u ovom dokumentu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Mectronic Medicale srl - BR_DPF_EN_2023-06_001



MECTRONIC MEDICALE s.r.l.

via Orio al Serio 15,
24050 Grassobbio (BG) - ITALIA

Tel: +39 035656080 | Fax: +39 035657361

www.mectronicmedicale.com | info@mectronicmedicale.it